

Lancettes jetables stériles

permettant un prélèvement de sang capillaire facile et confortable

Quasiment indolore

La pointe d'aiguille à triple biseau par polissage électrolytique garantit une finition nette et douce pour des prises de sang optimales et un confort maximum.



mylife™ Lancets

(agrandie 150x)




Lancettes concurrentes

(agrandie 150x)

Longueur d'aiguille constante

L'aiguille est positionnée parfaitement concentriquement assurant une longueur d'aiguille déployée constante.

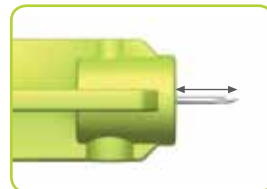

Sécurité optimisée

Aucune trace de PEBD (polyéthylène à basse densité) ne subsiste sur la pointe de l'aiguille après avoir retiré le capuchon protecteur de la lancette.

Conçue pour l'utilisation avec l'autopiqueur mylife™ Softlance et la plupart des autres dispositifs de prélèvement

Procédé sûr après utilisation



1. Autopiqueur mylife™ Softlance et mylife™ Lancets multicolores après utilisation.



2. Pour prévenir toute blessure par piqûre, la lancette peut aisément être plantée dans son capuchon protecteur.



3. Ejection sûre et hygiénique de la lancette sans contact avec les mains.

mylife™ Lancets - une gamme de produits de qualité idéale pour les adultes et les enfants

mylife™ Lancets standard

Des lancettes de haute qualité pour une utilisation quotidienne et qui assurent un prélèvement sanguin optimal. Conçues pour rendre le prélèvement sanguin plus facile et plus confortable.



mylife™ Lancets multicolores

Lancettes avec capuchon pour une élimination encore plus sûre. Idéales pour les enfants. Disponibles en sept couleurs différentes.



Stérilité préservée pendant 5 ans

Dose stérilisante déterminée selon norme ISO 13409

N° réf.	Qté.	Description	Calibre (Gauge)	Diamètre d'aiguille	Longueur de pt.	Diamètre ext. du corps
7100335	200 pcs	mylife™ Lancets stand.	30G	0.298 ~ 0.320 mm	3.3 +/- 0.25 mm	6.3 +/- 0.5 mm
7100336	200 pcs	mylife™ Lancets multic.	30G	0.298 ~ 0.320 mm	3.3 +/- 0.25 mm	6.3 +/- 0.5 mm

Téléphone gratuit : 0800 44 11 44

Pour plus d'informations visitez www.mylife-diabetescare.ch

Ypsomed AG // Marché suisse // Brunnmattstrasse 6 // 3401 Burgdorf

www.ypsomed.com // T +41 34 424 41 41 // F +41 34 424 33 20 // swissmarket@ypsomed.com