

my
life

Clickfine®



UNIVERSAL
CLICK

A chaque 'Click' un sentiment de sécurité : l'aiguille est bien verrouillée !

- Technologie universal click® brevetée
- Compatible avec tous les stylos injecteurs courants
- Revêtement siliconé pour des injections pratiquement indolores
- Un 'Click' audible confirme le bon positionnement de l'aiguille
- Codage couleurs facilitant la distinction des longueurs d'aiguille



Plus de liberté. Plus de confiance. Avec mylife™.

YPSOMED
SELF-CARE SOLUTIONS

my
life

Clickfine®



La nouvelle 4.5 mm


**Simple comme bonjour
et entièrement sûre !**

- L'aiguille pour stylos mylife™ Clickfine® la plus courte et toujours aussi sûre
- Atténue la crainte des aiguilles
- Revêtement siliconé pour des injections pratiquement indolores



La sécurité à 100%

L'aiguille pour stylos mylife™ Clickfine® la plus courte – convient parfaitement aux enfants et aux personnes minces

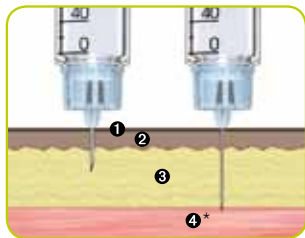

- ❶ Épiderme
- ❷ Derme
- ❸ Tissu adipeux sous-cutané
- ❹ Couche musculaire

* Grâce aux toutes nouvelles aiguilles pour stylos mylife™ Clickfine® qui sont plus courtes, vous réduisez le risque d'injections intramusculaires.


L'épaisseur de la peau varie entre 1.9 – 2.4 mm seulement dans tous les sites d'injection indépendamment de l'indice de masse corporelle (IMC), de l'âge ou du sexe de l'individu¹.

Lors d'injections avec une aiguille ultra courte de 4 à 5 mm de longueur et à un angle de 90°, l'administration d'insuline dans le tissu sous-cutané est garantie^{1,2}.


De récentes études montrent que le reflux d'insuline n'est pas plus important qu'avec une aiguille de 8 mm^{2,3}.




Simple à utiliser dès la première fois
S'adapte sur tous les stylos à injection courants

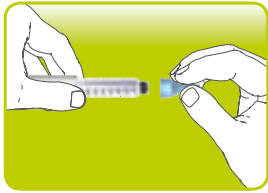

Emboîter l'aiguille sur le stylo et enfoncer vers le bas – le verrouillage est confirmé par un "click" audible.

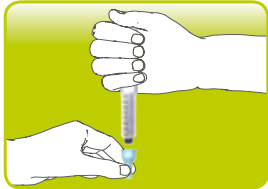

Conseil : positionner l'aiguille perpendiculairement à la table et emboîter le stylo par-dessus.

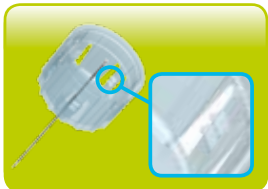

Cinq fois deux arrêts pour un verrouillage sûr.



Technologie Universal Click® brevetée.

Sélectionnez la bonne longueur d'aiguille
Code couleur pratique pour une identification claire du produit

Les aiguilles mylife™ Clickfine® sont disponibles en cinq tailles différentes :



4.5 mm, 31G/0.25 mm



6 mm, 31G/0.25 mm



8 mm, 31G/0.25 mm



10 mm, 29G/0.33 mm



12 mm, 29G/0.33 mm

Pour tous ceux qui refusent l'inactivité



Porte-canule avec fenêtre pour un contrôle visuel supplémentaire. Revêtement spécial en silicone et triple polissage des facettes pour une injection en douceur.



Capuchon de protection interne simple à enlever.




Capuchon de protection externe facile à prendre en main. Avec languette déchirable pour retirer aisément la pellicule de protection.

Cliquez avant chaque injection
mylife™ Clickfine® sont des produits de disposition stériles

Utilisez une aiguille neuve avant chaque injection pour éviter les blessures sous-cutanées ou les infections qui peuvent être causées par des aiguilles sales, émoussées ou bouchées.



Aiguille neuve

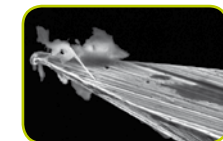

Aiguille usagée comportant des résidus de tissu



Clickfine®



Universal click®

mylife™ Clickfine® est compatible avec tous les stylos à injection courants

Conformément à la norme ISO 11608-2, les aiguilles pour stylos injecteurs mylife™ Clickfine® sont totalement fonctionnelles et sûres dans l'utilisation avec les stylos injecteurs mentionnés ci-dessous.

Sanofi-Aventis

OptiPen®Pro, OptiSet®, OptiClik®, SoloStar®, ClikStar®, TactiPen®

Novo Nordisk A/S

NovoPen® 3, 4 + Junior, FlexPen®, Next Generation FlexPen®, Victoza® Pen

Owen Mumford, Inc.

Autopen®, Autopen® 24

Genentech

Nutropin AQ Pen®

Merck Serono

GONAL-f® Pen

Ypsomed AG

ypsopen®

Eli Lilly and Company

HumaPen® Luxura, Luxura HD, Memoir, HumatroPen®, HumatroPen®3, Humalog® Pen, KwikPen®

Berlin Chemie

BerliPen® 301, 302 + junior, BerliPen® areo + areo 2

B. Braun

Omnican® Pen

Pfizer Ltd.

Genotropin Pen®

F. Hoffmann – La Roche

Roferon® Pen

Amylin Pharmaceuticals, Inc. and Eli Lilly and Company

Byetta™ Pen

Amylin Pharmaceuticals, Inc.

SymmlinPen™

Certains stylos à injection ne sont pas disponibles dans tous les pays. Toutes les marques sont des marques déposées des fabricants mentionnés.

Veuillez lire la notice d'utilisation de votre stylo d'injection avant d'employer l'aiguille à stylo mylife™ Clickfine®.

Plus de **liberté**.
Plus de **confiance**.
Avec **mylife™**.



Lecteur pour
auto-surveillance
glycémique



Aiguilles pour stylo
et aiguilles sécurisées
pour stylo



Systèmes pour
perfusion



Accessoires et
Services

mylife™ est une gamme de produits et services pour les personnes atteintes de diabète. Elle leur offre tout ce dont ils ont besoin pour s'auto-traiter facilement et avec fiabilité, en leur donnant plus de liberté et plus de confiance pour la vie qu'ils souhaitent mener.

Téléphone gratuit : 0800 44 11 44

Pour plus d'information visitez www.mylife-diabetescare.ch

Ypsomed AG // Marché suisse

Brunnmattstrasse 6 // 3401 Burgdorf

T +41 34 424 41 41 // F +41 34 424 33 20

www.ypsomed.com // swissmarket@ypsomed.com